

カインティック比濁法 パイロテル-T 検量線例

【検量線範囲: 1, 0.1, 0.01EU/mL】

■機器情報

測定機器: Wellreader Advance

■試薬情報

試薬: Pyrotell-T


溶解液: Glucashield Buffer

標準品: JPRSE

■相関係数

r = 0.996

検量線情報

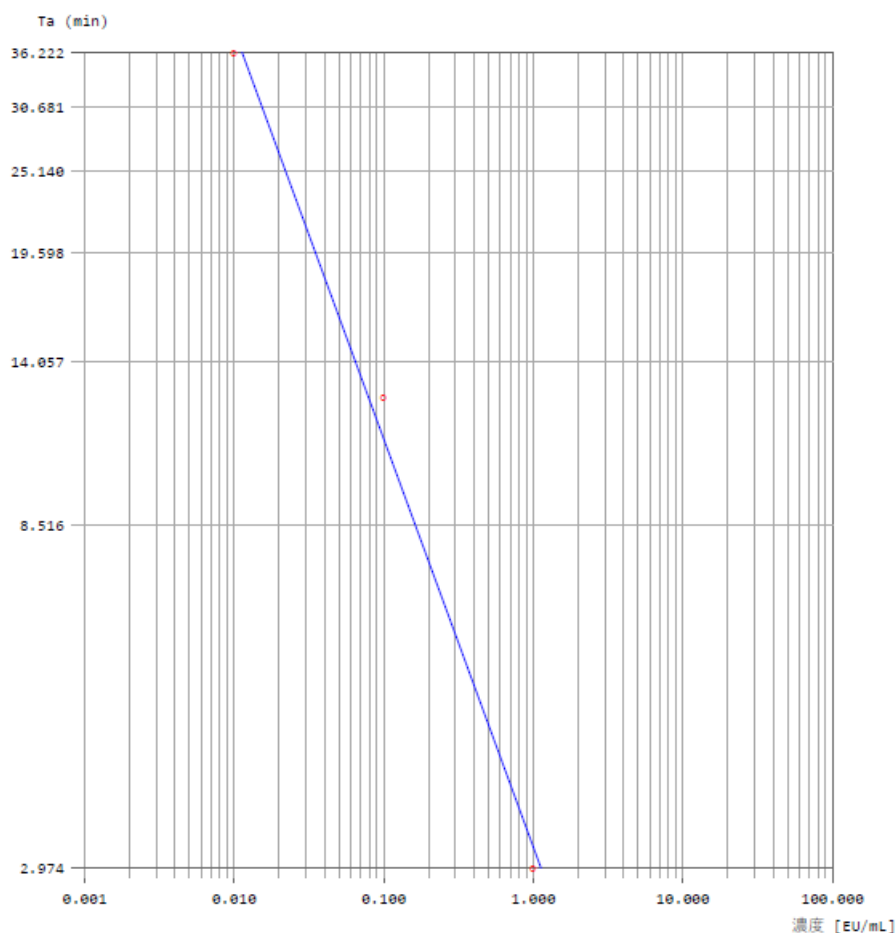

反応時間法

一次式

$Y = AX + B$ $X = \text{Log}(x * 1000)$, $Y = \text{Log}(y * 1000)$

A = -0.54279 B = 11.81142

r = -0.99607 (適)

濃度 Ta
[EU/mL](min)

St-01 0.01 36.22222

St-02 0.1 12.58333

St-03 1 2.97436

お問い合わせ先

生化学工業株式会社 海外事業推進部 LALグループ

Tel. 03-5220-8953 Fax.03-5220-8956

E-mail: lal@seikagaku.co.jp

URL : <https://www.lalbiz.com>



生化学工業株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6-1