

印刷日： 2023/03/22 17:16:08
測定日： 2023/03/22 14:51:03
測定番号： 372
管理番号： 372


エンドキシン自動測定システム ENDOMEASUREを用いた 遺伝子組換え試薬パイロスマートネクストジェンの検量線例

分注機器： MICROLAB STARLET
測定機器： Wellreader Advance

検量線情報

試薬情報

試薬： PyroSmart NextGen
試薬ロット番号： PNG0001
溶解液： Reconstitution Buffer
溶解液ロット番号： PN002631
標準液： JPRSE
標準液ロット番号： ENH26A

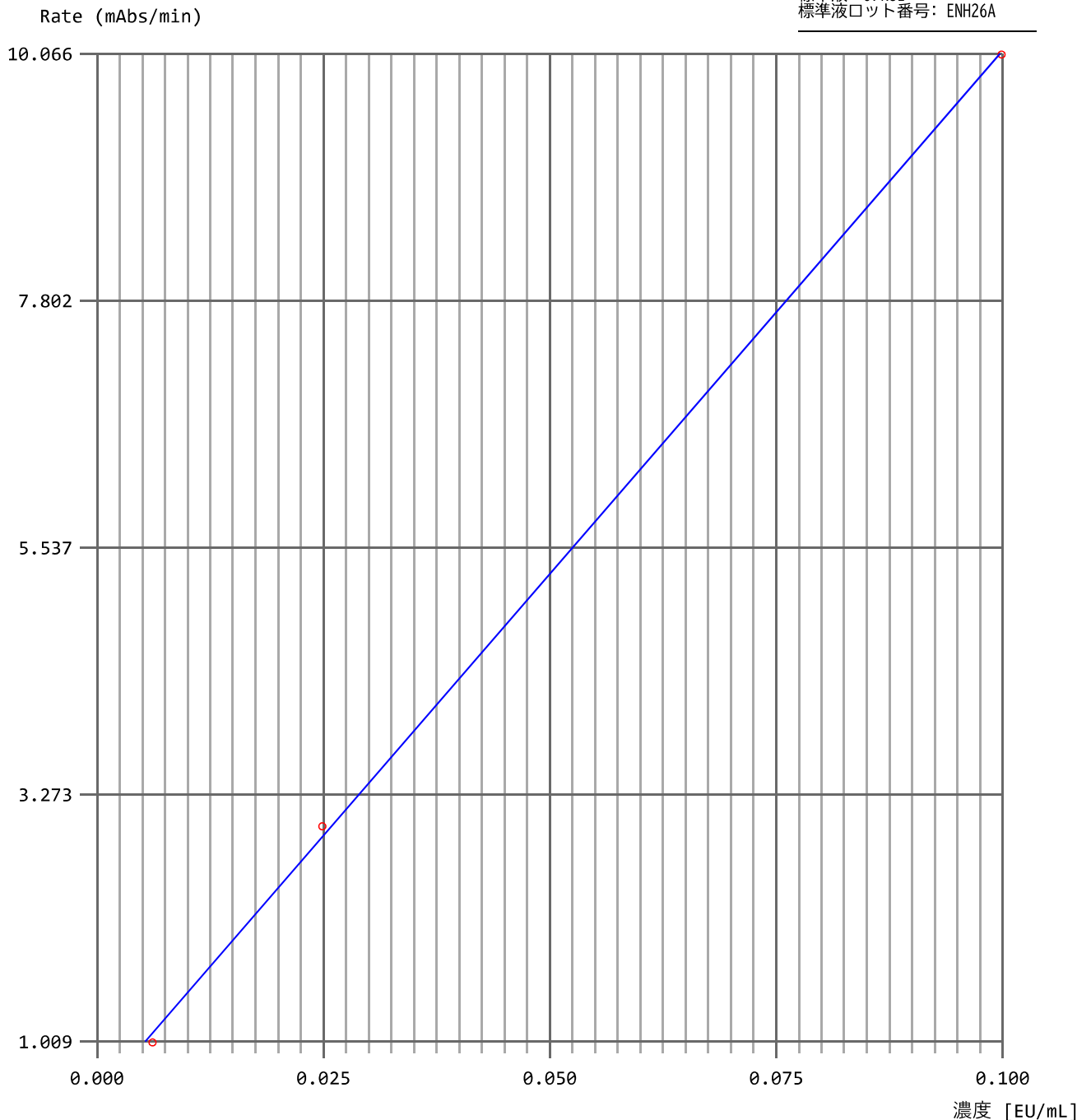

反応速度法
一次式
 $Y = AX + B$ X:Linear, Y:Linear
A = 95.96458 B = 0.48986
r = 0.99981 (適)

	濃度 [EU/mL]	Rate (mAbs/min)
St-01	0.00625	1.00860
St-02	0.025	2.99026
St-03	0.1	10.06606